



Cette notice à l'attention des porteurs de lentilles de contact souples hydrophiles PUREVISION®, concerne les instructions à suivre pour le port et l'entretien de leurs lentilles.

Elle s'applique à :

Désignation	Type de matériau	Teneur en eau (% p/p)	Solution de conservation
PUREVISION® (balafilcon A) Lentilles de contact légèrement teintées pour faciliter la manipulation	Balafilcon A	36	Solution saline tampon borate
PUREVISION® Toric (balafilcon A) Lentilles de contact légèrement teintées pour faciliter la manipulation	Balafilcon A	36	Solution saline tampon borate
PUREVISION® Multi-Focal (balafilcon A) Lentilles de contact légèrement teintées pour faciliter la manipulation	Balafilcon A	36	Solution saline tampon borate
PUREVISION®2 (balafilcon A) Lentilles de contact légèrement teintées pour faciliter la manipulation	Balafilcon A	36	Solution saline tampon borate avec poloxamine
PUREVISION®2 For Astigmatism (balafilcon A) Lentilles de contact légèrement teintées pour faciliter la manipulation	Balafilcon A	36	Solution saline tampon borate avec poloxamine

Description et conditions de port

Ces lentilles de contact sont des lentilles à port journalier qui doivent être renouvelées périodiquement selon la prescription de votre professionnel de soin des yeux.

Elles peuvent aussi être utilisées comme des lentilles jetables après chaque utilisation ou en port continu, jusqu'à 1 à 30 jours avant de les retirer, selon les recommandations de votre professionnel de soin des yeux.

Avant d'être réutilisées, les lentilles doivent être impérativement nettoyées, rincées et désinfectées.

Suivez toujours les recommandations de votre professionnel de soin des yeux en matière de durée de port et de période de renouvellement de vos lentilles.

Ces lentilles sont fournies stériles (stérilisation à la vapeur)  et peuvent être réutilisées selon la prescription de votre ophtalmologiste.

N'utilisez jamais les lentilles en cas de dommage, de fuite ou d'ouverture du blister qui les contient.

Instructions pour la pose et le retrait de vos lentilles

Toujours se laver les mains(en évitant les savons parfumés ou à base d'actifs) et les essuyer soigneusement avant de manipuler vos lentilles de contact.

Posez la lentille sur la paume de la main et assurez-vous qu'elle est dans le bon sens.



Vérifiez l'état de la lentille avant de la placer sur votre œil. N'utilisez jamais une lentille rayée ou endommagée.

Pour retirer vos lentilles, toujours se laver et s'essuyer soigneusement les mains puis utilisez un de vos doigts pour faire glisser la lentille en périphérie inférieure de l'œil et la récupérer. En cas de difficulté, utiliser une goutte de confort pour faciliter le retrait de la lentille.

Instructions pour l'entretien de vos lentilles

Entre chaque utilisation, le nettoyage et la désinfection de vos lentilles de contact est un geste essentiel pour l'hygiène et la santé de vos yeux :

- utilisez toujours les solutions pour l'entretien de vos lentilles selon les instructions du fabricant,
- utilisez toujours les solutions d'entretien avant leur date de péremption et pour chaque entretien, la solution intacte du flacon en cours,
- n'utilisez jamais l'eau du robinet ou l'eau minérale ou votre salive pour rincer, conserver ou ré-humidifier vos lentilles,
- en dehors des heures de port, les lentilles doivent être complètement immergées dans la solution d'entretien recommandée, à l'intérieur de leur étui,
- n'utilisez jamais d'objets pointus ou vos ongles pour sortir les lentilles de leur étui ou les retirer de vos yeux,
- n'oubliez pas que vous devez nettoyer votre étui chaque fois que vous nettoyez vos lentilles,
- pensez à jeter vos lentilles à la fin de la période de renouvellement qui a été fixée par votre professionnel de soin des yeux.

Avertissement et précautions

La non-observance des recommandations de votre professionnel de soin des yeux en matière de durée de port et de période de renouvellement de vos lentilles ainsi que le non-respect des instructions d'entretien des lentilles, peut augmenter le risque d'infections oculaires graves.

Pour un port journalier prescrit, ne pas garder les lentilles pendant votre sommeil.

Vous ne devez pas porter de lentilles de contact si vous :

- présentez une allergie, une inflammation, une infection, une rougeur-oculaires ou péri-oculaires,
- présentez une sécheresse oculaire
- souffrez d'un état de rhume, de grippe ou de toute maladie générale qui pourrait être affectée par le port de lentilles de contact ou pourrait affecter le port de lentilles.

Veillez consulter votre professionnel de soin des yeux avant de porter des lentilles de contact, si vous pratiquez des sports nautiques, demeurez de façon prolongée en environnement très sec et/ou poussiéreux, ou si vous utilisez un ou plusieurs collyres.

Vous devez immédiatement arrêter le port de lentilles en cas de:

- sensation de picotement, brulure, démangeaison, irritation ou douleur oculaires
- inconfort oculaire anormal
- hypersécrétions oculaires ou larmoiements
- rougeur oculaire
- sécheresse oculaire sévère et persistante
- vision réduite ou trouble de la vision
- arcs en ciel ou halos à proximité des lumières
- photosensibilité excessive

Si un (ou plusieurs) de ces symptômes persiste (nt) après retrait, nettoyage et réinsertion des lentilles ou après utilisation de nouvelles lentilles, retirer définitivement vos lentilles et allez consulter votre ophtalmologiste.

Ces troubles, s'ils ne sont pas déclarés et pris en compte, peuvent conduire à de sérieuses aggravations et/ou complications oculaires.

Sélection des solutions d'entretien

Pour le nettoyage et la désinfection des lentilles de contact Purevision® Bausch & Lomb en Balafilcon A légèrement teinté, ne pas utiliser le Système désinfectant Ultracare ou l'un de ses composants (solution désinfectante Ultracare Oxysept, comprimés neutralisant Oxysept et nettoyant enzymatique Ultrazyme), car les dimensions de la lentille seraient modifiées.

Référence des symboles utilisés sur le blister et la boîte




Droit acquitté pour la gestion des déchets selon directive 94/62/EC



Prescription et délivrance uniquement par un professionnel de soin des yeux.



Bausch & Lomb Incorporated,
Rochester, NY 14609, USA

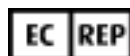


Bausch & Lomb Incorporated,

106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, Royaume Uni



Indique le marquage de conformité CE

0050 et le numéro de l'organisme certifié

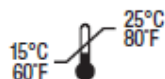

limite de température

® marque déposée Bausch & Lomb incorporated

Les autres produits/ noms de marques sont les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.